



CREATED BY APTOS

ИССЛЕДОВАНИЕ Ellagen PLLA + HA



Дизайн исследования

CREATED BY APTOS

Характеристики участников исследования

- Приняли участие 50 пациентов в возрасте от 25 до 58 лет
- Средний возраст составил 41,5 год
- Из участников были 44 (88%) женщины и 6 (12%) мужчин

Распределение по морфотипам:

Отечно-деформационный (28 человек)
Мелкоморщинистый (12 человек)
Усталый (10 человек)

Распределение по группам исследования:

Группа I - 34 случая
Группа II - 26 случая
Группа III - 23 случая

2 процедуры введения препарата с интервалом 2 месяца
Осмотр и фиксация результатов 0 (день первой процедуры),
60 (день второй процедуры), 120 и 180 сутки.
За период исследования выполнено 100 процедур
с применением Ellagen HA, использовано 146 флаконов препарата.

* Каждый участник может состоять в нескольких группах

** Наиболее частое сочетание показания из I и II групп (36 случаев)





Дизайн исследования

CREATED BY APTOS

Распределение участников исследования по показаниям (атрофические и возрастные изменения)

- Наиболее частое показание – коррекция возрастных изменений (складки и морщины, потеря объёма или липодистрофия) составила 68% случаев всех обращений
- Асимметрия (заболевания, травмы, возрастные изменения) – 17%
- Выраженное снижение тонуса, дряблость кожи – 15%

Распределение участников исследования по показаниям (рубцовые деформации)

- Атрофические рубцы, включая стрии и рубцы постакне, составили практически 70% всех случаев
- Нормотрофические – 30%

* Возраст рубцов от 1 года до 23 лет





Результаты коррекции возрастных изменений

CREATED BY APTOS

1. Шкала WSRS (Wrinkle Severity Rating Scale):

- У большинства пациентов наблюдается снижение выраженности морщин на 1–2 балла к 60 дню
- Дальнейшие изменения происходят медленнее или стабилизируются после 120–180 дней
- У некоторых пациентов (например, ID: 20041976005) улучшения сохраняются до конца периода наблюдения

2. Шкала Baker (птоз):

- Уровень птоза снижается с IV или III степени до II или III степени у большинства пациентов
- Прогресс наиболее заметен к 60-120 дню и стабилен в последующие периоды

3. Шкала Lemperle:

- Глубина морщин уменьшается на 1–2 балла у большинства участников исследования
- Пациенты с глубокими морщинами изначально (балл = 4) демонстрируют более значительное улучшение



Результаты применения ДО/ПОСЛЕ

CREATED BY APTOS



Июль 2024




Январь 2025




Результаты применения ДО/ПОСЛЕ

CREATED BY APTOS

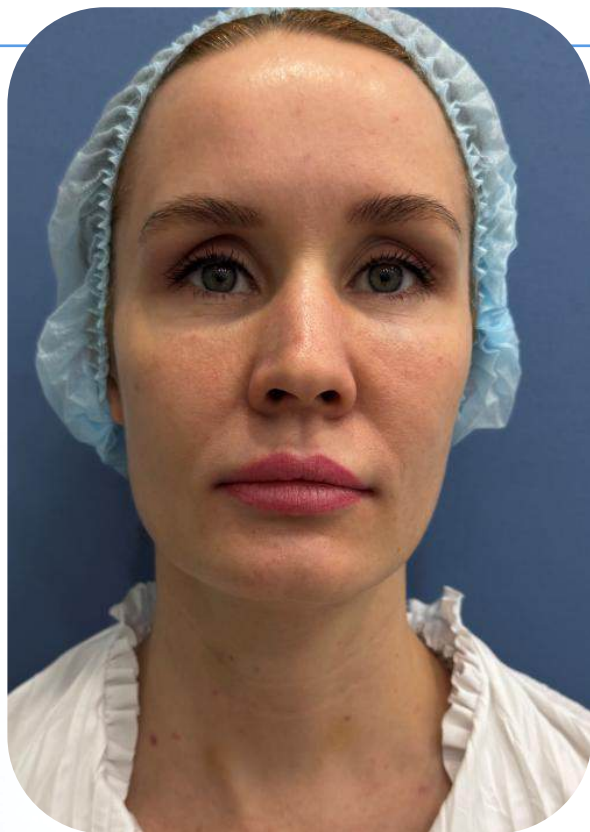

Июль 2024

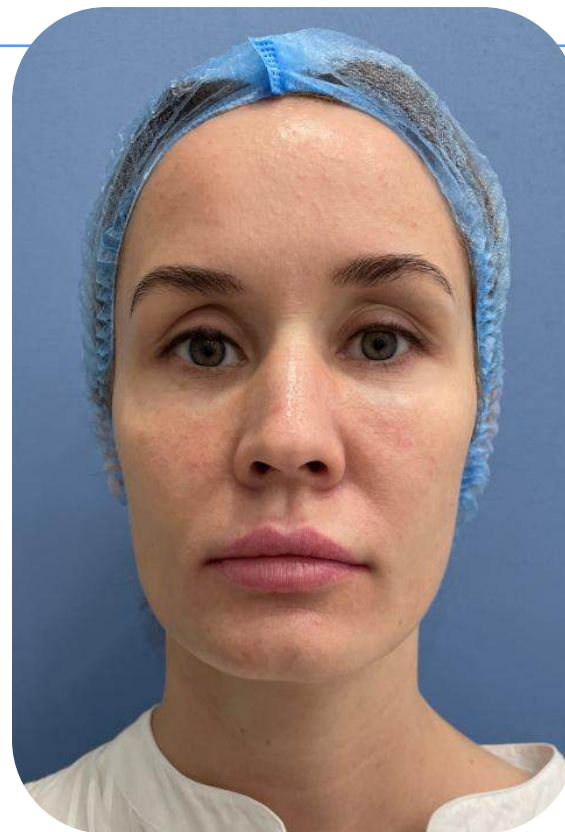

Январь 2025




Результаты применения ДО/ПОСЛЕ

CREATED BY APTOS



Июль 2024

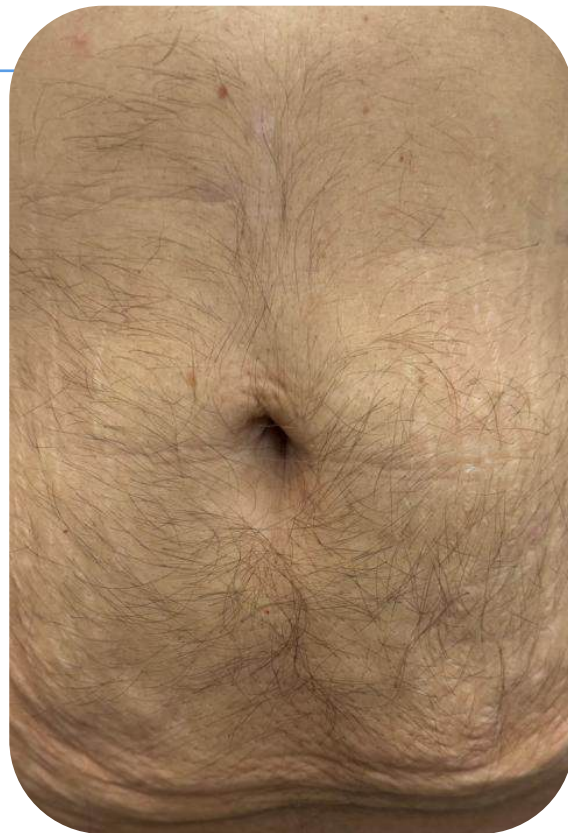

Ноябрь 2024



Январь 2025



Результаты применения ДО/ПОСЛЕ

CREATED BY APTOS



Июль 2024



Январь 2025



Выводы клинического исследования

CREATED BY APTOS



Эффективность ELLAGEN HA в коррекции морщин

- Лечение продемонстрировало стабильное снижение выраженности морщин на протяжении всего периода наблюдения.
- Наибольшее улучшение наблюдается в первые два месяца терапии:
 - По шкале WSRS: снижение на -0.92 балла за первые два месяца.
 - По шкале Lemperle: снижение на -0.62 балла за первые два месяца.
- После первых двух месяцев темп улучшений замедляется:
 - Между 60 и 120 днями снижение составляет:
 - По WSRS: -0.19 балла.
 - По Lemperle: -0.19 балла.
 - Между 120 и 180 днями изменения минимальны:
 - По WSRS: -0.06 балла.
 - По Lemperle: -0.02 балла.
- Общее снижение выраженности морщин за весь период исследования составило:
 - По WSRS: -1.22 балла.
 - По Lemperle: -0.86 балла



Выводы клинического исследования

CREATED BY APTOS



Эффективность лечения птоза (шкала Baker)

- Лечение продемонстрировало стабильное снижение выраженности птоза на протяжении всего периода наблюдения.
- Наибольшее улучшение также отмечается в первые два месяца терапии — снижение на -0.45 балла по шкале Baker.
- После первых двух месяцев темп улучшений замедляется:
 - Между 60 и 120 днями снижение составляет -0.24 балла.
 - Между 120 и 180 днями изменения минимальны — всего -0.09 балла.



Выводы клинического исследования

CREATED BY APTOS



Лечение продемонстрировало высокую эффективность в коррекции возрастных изменений кожи лица и тела (морщины, складки) и снижении выраженности птоза у большинства пациентов:

1. Основной эффект достигается в первые два месяца после начала терапии благодаря значительному уменьшению показателей по всем шкалам оценки состояния кожи (WSRS, Baker, Lemperle).
2. Дальнейшие изменения происходят медленнее или стабилизируются к концу периода наблюдения (6 месяцев).
3. Результаты подтверждают эффективность предложенного метода лечения для коррекции возрастных изменений кожи лица и тела.



Препараты поли-L-молочной кислоты с содержанием HA на рынке РФ

Препарат	Состав	Действующее вещество, мг		Размер частиц, мкм	Время разведения
ELLAGEN	PLLA + HA	200	170 + 30	20 - 30	20 минут
ELLAGEN	PLLA + HA	100 мг+200 мг	300 (85 + 170 + 45)	20 – 30	20 минут
JUVELOOK	PDLLA + HA	50 мг	50 (42,5 + 7,5)	20 – 40	30 минут
LENISNA	PDLLA + HA	200 мг	200 (170 + 30)	40 – 80	24 часа



Главное об Ellagen PLLA + HA

CREATED BY APTOS



Новый безопасный
коллагеностимулятор
с доказанной эффективностью
с более физиологическим и
продолжительным действием



Прогнозируемый результат
с отсутствием побочных эффектов
с более ярким и быстрым эффектом



**Лучшее соотношение
цены и качества**
в категории препаратов
поли-L-молочной кислоты





Ellagen

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

CREATED BY APTOS

